


Portátil CO2 Láser Fraccionado

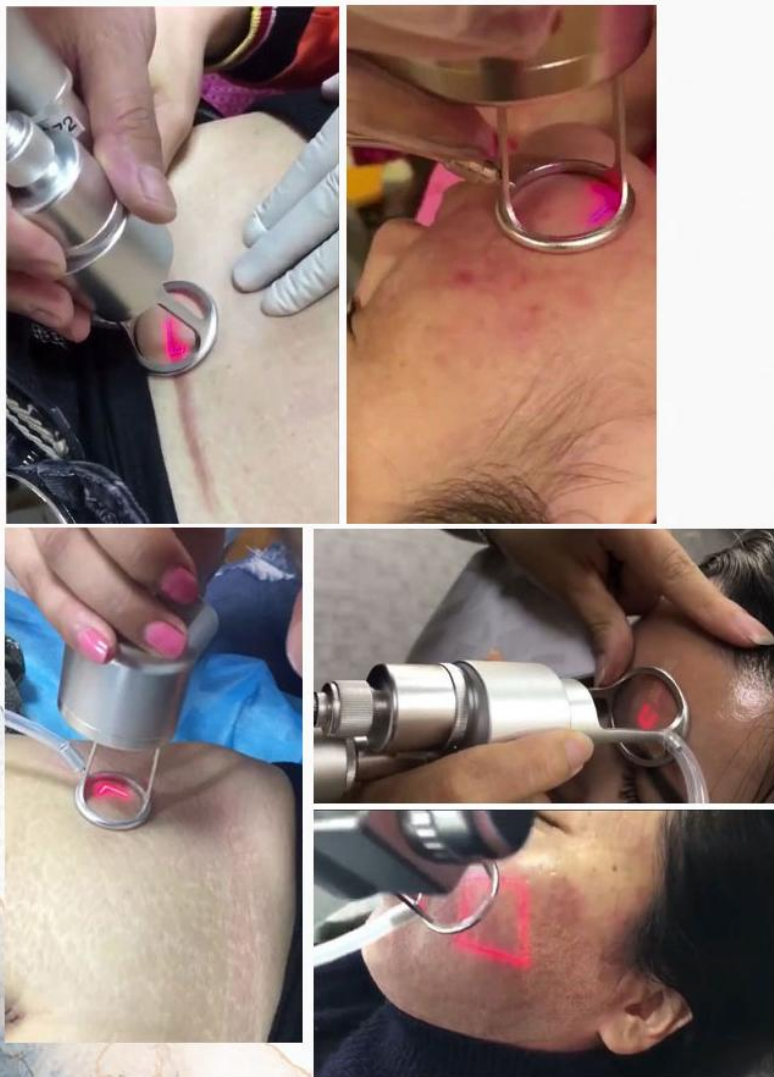

Tratamientos

Eliminación de cicatrices de acné, eliminación de cicatrices, eliminación de estrías

Eliminación de manchas

Estiramiento de la piel, rejuvenecimiento de la piel, antienvjecimiento, rejuvenecimiento completo

Eliminando verrugas, lunares

Cortar tejidos blandos


Estiramiento vaginal, rejuvenecimiento vaginal, terapia de uroclepsia,
terapia de inflamación ginecológica



Teoría del Trabajo

A. Eliminación de Cicatrices


El láser fraccionado de CO_2 de súper pulso emite puntos focales muy delgados, en una fórmula de matriz, estos rayos pueden penetrar directamente en la dermis y gasificar el tejido arrugado y el tejido cicatricial al instante, y emitir una poderosa señal de síntesis de colágeno y luego comenzar la reparación del tejido, reordenamiento del colágeno y otras reacciones cutáneas. El colágeno fresco se regenera y multiplica para hacer la piel compacta y brillante, reducir las arrugas, eliminar las bolsas de los ojos y curar las cicatrices. Desde el rejuvenecimiento hasta la eliminación de arrugas y cicatrices, grandes manchas de pigmento se convierten en polvo, se descargan gradualmente con la circulación linfática, para lograr la eliminación de la pigmentación y el blanqueamiento de la piel.

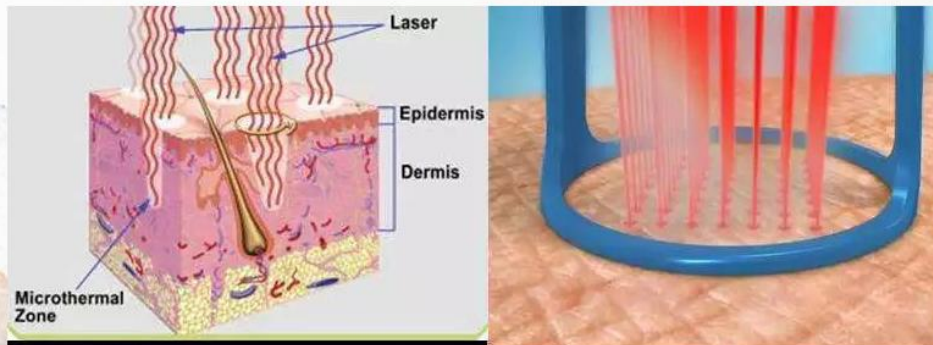

Teoría del Trabajo

B. Estiramiento Vaginal

El láser de CO2 fraccional actúa sobre la mucosa y el músculo vaginal, estimula la regeneración de fibroblastos en la mucosa y el músculo, remodela el colágeno y las fibras elásticas dañadas, engrosa la pared vaginal y tensa la vagina. La estimulación del sistema microvascular del láser de CO2 produce vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo, provoca oxidación celular, aumenta el aporte de nutrientes, hace que las mitocondrias liberen más ATP, activa la función celular, aumentando la secreción de mucosa vaginal. La estimulación del láser microvascular de CO2 activa la función celular, mejora la respuesta integral y dinámica de los vasos sanguíneos vaginales a la estimulación sexual, permitiendo así una mejora significativa de la sensibilidad. El láser de CO2 puede cambiar las características organizativas, producir colágeno, tensar la mucosa, mejorar la lubricación vaginal y la sensibilidad de manera efectiva; Puede activar la función de la mucosa sana, normalizar el valor del PH y la flora, reduciendo así la posibilidad de infección vaginal.

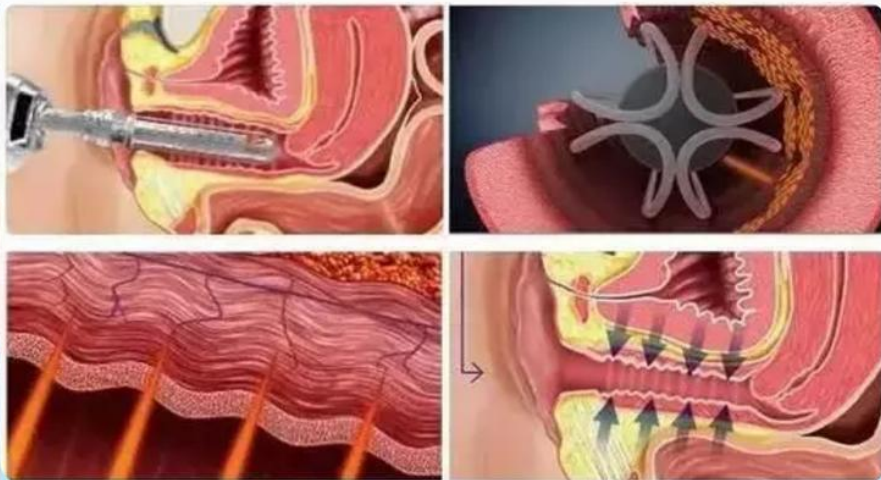

Cabezales de Tratamiento--Sonda Fraccionada




Aplicaciones de sonda fraccionada:

reducir todo tipo de cicatrices (cicatrices hipertróficas, cicatrices deprimidas)

eliminar manchas de edad, eliminar marcas de acné

eliminar las estrías

rejuvenecer la piel

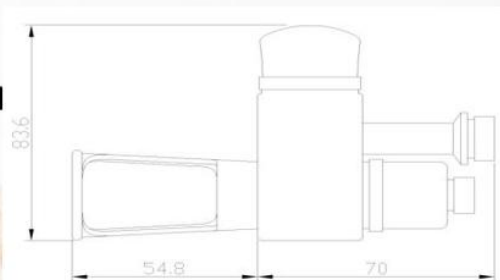

Con motores de escaneo láser de alto rendimiento, tiempo de fraguado más rápido, alta precisión, buena estabilidad, adecuado para aplicaciones de equipos médicos y de belleza de alta precisión.

Cabezales de Tratamiento--Sondas de Ultra Pulso



Aplicación de las sondas de ultra pulso:
cortar tejidos blandos (verrugas, tumores, etc.)

3 puntas de diferentes tamaños para tejidos blandos en diferentes áreas

Cabezales de Tratamiento--Sondas Ginecológicas



sonda vaginal de 360 grados

Aplicación de sondas ginecológicas:
estiramiento vaginal, rejuvenecimiento vaginal,
terapia de uroclepsia, terapia de inflamación ginecológica.




sonda de vulva




sonda de cuello uterino

Motor de Escaneo & Módulo de Controlador


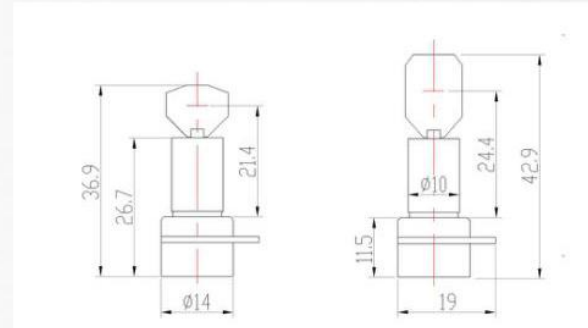


Los motores de escaneo son uno de los componentes más importantes de los escáneres, hemos introducido el modo de control de sensor fotoeléctrico internacional más avanzado y hemos llevado a cabo un diseño de optimización integral desde los aspectos mecánicos del escáner, hemos reducido en gran medida el tamaño del escáner y hemos mejorado la velocidad y precisión del marcado, el rendimiento y la estabilidad de los productos han alcanzado el nivel líder en el país y en el extranjero.

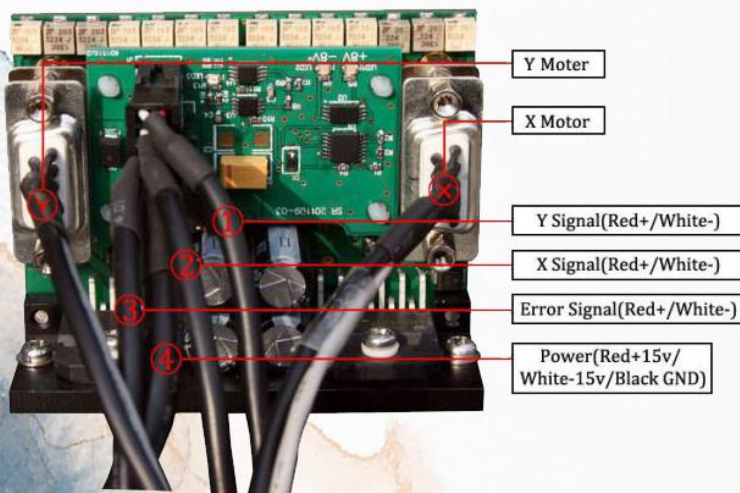

El módulo controlador se adopta con el principio de control internacional más avanzado, todos los componentes principales son elementos electrónicos de alta precisión, redujo en gran medida el tamaño de la placa controladora y aumentó la función única de protección contra fallas que la placa controladora común no tiene, por lo tanto, mejoró la seguridad y confiabilidad de los productos en gran medida.

Pantalla

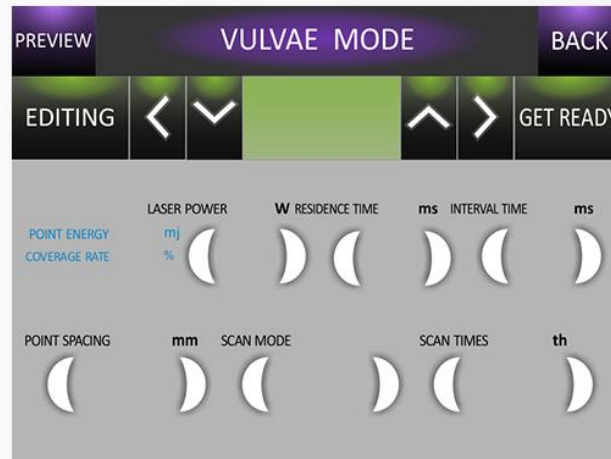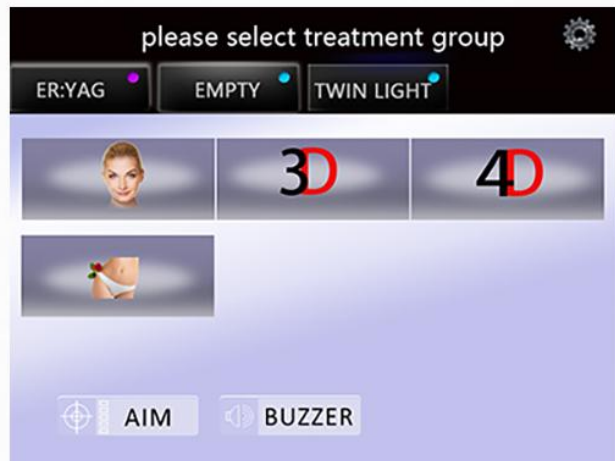

Diseño fácil de usar

Varios idiomas para la opción

Especificación Técnica

Longitud de onda: 10600 nm

Modo de salida: modo fraccionado, modelo de corte (modo de pulso), modo vaginal

Potencia de salida: 0-60W

Pantalla: 10,4 pulgadas

Sistema de refrigeración: refrigeración por aire

Luz de indicación: 650 nm

Sistema de transmisión: brazo de resorte de articulación de 7 articulaciones

Peso bruto del paquete: 31 kg

Tamaño del paquete: 93*52*36cm



ELOS PHOTOELECTRIC



Para el manual o vídeo del láser, póngase en contacto con nosotros.

Email: vicky_zhongshang@hotmail.com

WhatsApp: 0086-158-6075-2870

Web: www.elosipl.com